


Hoortoestel met oorstukje aanbrengen

Tip: het Rechterhoortoestel heeft een Rode markering en het linkerhoortoestel een blauwe. De R van rood en rechts is een ezelsbruggetje om het makkelijk te kunnen onthouden.


1. Plaats eerst het oorstukje in het oor, waarbij u het onderste deel van het slangetje vasthoudt.

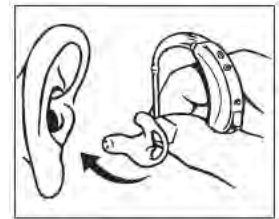

2. Het kan daarbij helpen met de andere hand de oorschelp een stukje naar achteren en van het hoofd af te trekken.




3. Als het oorstukje is ingebracht, hangt u het hoortoestel achter het oor, zodat het oorhaakje op het oor rust, vlak bij uw hoofd.

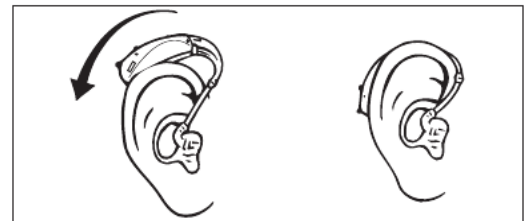


Hoortoestel en oorstukje verwijderen

1. Haal eerst het hoortoestel achter de oorschelp vandaan.

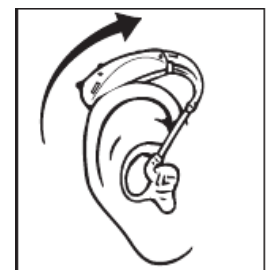

2. Trek voorzichtig het oorstukje uit het oor, waarbij u het onderste deel van het slangetje vasthoudt. Is het moeilijk om het oorstukje uit het oor te krijgen, dan kunt u het voorzichtig heen en weer bewegen terwijl u het naar buiten trekt. Het kan ook helpen om met de andere hand de oorschelp iets naar achteren en van het hoofd af te trekken.

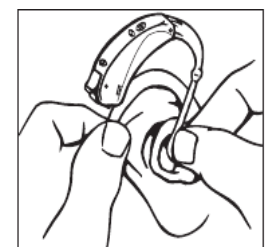

Hoortoestel schoonmaken

Gebruik een zachte doek om uw hoortoestel schoon te wrijven.
Reinig uw hoortoestel nooit met water, een schoonmaakmiddel of een andere vloeistof.




Gebruikt u het hoortoestel niet, laat dan de batterijlade openstaan. Zo wordt het hoortoestel geventileerd en kan eventueel aanwezig vocht verdampen.



Hoortoestel drogen

Nog beter is het om uw hoortoestel, met het batterijklepje open, dagelijks te drogen in een speciaal elektrisch droogapparaat. Zo voorkomt u dat er vocht in uw hoortoestel komt dat uw hoortoestel kan beschadigen. Daarnaast doodt de uv-lamp in het elektrische droogapparaat bacteriën en schimmels.

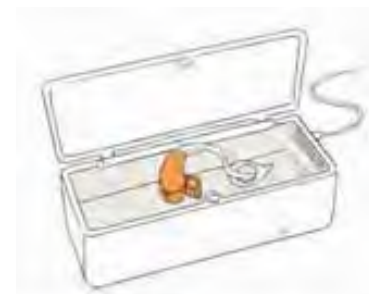


U kunt uw hoortoestel, met het batterijklepje open, ook drogen in een eenvoudig droogdoosje waarin u een droogtablet legt. De droogtablet is oranje. Na enige tijd wordt de droogtablet wit: dan mag u deze vervangen door een nieuwe tablet.



Oorstukje schoonmaken

Controleer altijd of uw oorstukje schoon en droog is. Gebruik geen alcohol of schoonmaakmiddelen om uw oorstukje schoon te maken, maar volg de aanwijzingen hierna.

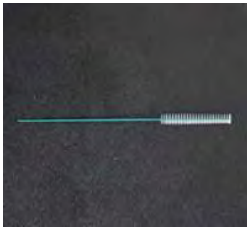


Spiraalborsteltje




Reinigingspennetje


1. Verwijder het oorstukje van het slangetje.

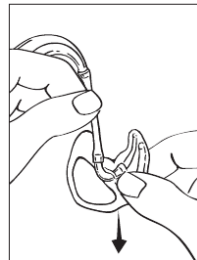

2. Maak de ontluchting schoon met het reinigingspennetje en/of een spiraalborsteltje (te verkrijgen bij HoortoestelWinkel).

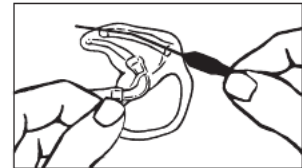

3. Maak het geluidskanaal schoon met het reinigingspennetje en/of een spiraalborsteltje.

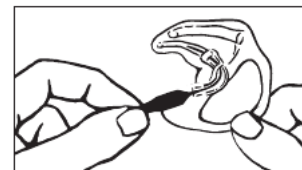

4. Verwijder ten minste 1x per week het oorstukje met slang van de oorhaak en reinig het met behulp van een reinigingstablet die speciaal ontwikkeld is voor het schoonmaken van oorstukjes. Bij HoortoestelWinkel adviseren wij u graag welk middel u het best kunt gebruiken.


- a) Leg het oorstukje in het bakje met een reinigingstablet.
- b) Sluit het bakje af met de deksel en laat het gedurende de hele nacht staan.



c) Spoel het oorstukje daarna af met water en droog het goed af.



d) Is er nog water achtergebleven, blaas dan het kanaal droog met een blaasbalgje. Gebruik geen alcohol of schoonmaakmiddelen om uw oorstukje schoon te maken.

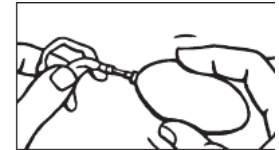

Is het slangetje van uw hoortoestel hard of geel geworden, of vertoont het barstjes, vervang het dan door een nieuw slangetje (dit kunt u ook laten doen door een medewerker in de winkel). Nieuwe slangetjes worden geleverd door HoortoestelWinkel. Past het oorstukje niet meer, neem dan contact op met uw audicien van HoortoestelWinkel.

Wat als het hoortoestel niet werkt?

Werkt uw hoortoestel niet, dan kan dat zijn omdat:

- het hoortoestel niet is ingeschakeld. Controleer of de batterijlade, die tevens aan-/uitschakelaar is, goed dichtzit;
- de batterij leeg is. Vervang de batterij. Zorg ervoor dat u de batterij correct plaatst en dat u de batterijlade goed sluit;
- de geluidsuitgang in het oorstukje verstopt is. Maak de geluidsuitgang schoon zoals hiervoor is beschreven.

Wat als het hoortoestel piept/fluit?

Wanneer uw hoortoestel piept/fluit, dan kan dat zijn omdat:

- uw oorstukje niet goed zit;
- uw oor verstopt zit met oorsmeer; dit kunt u laten controleren door uw audicien. Wanneer dit het geval is, zult u een afspraak met de huisarts moeten maken om het oor schoon te laten maken;
- het slangetje vervangen moet worden;
- het oorstukje te klein geworden is.

Kom altijd even langs in de winkel als u last blijft houden van een piepend of fluitend geluid.