

Hoortoestel met thin tube (dunne slang) aanbrengen


De thin tube kan gebruikt worden met een dome of een folieschaaltje:



Thin tube




Dome

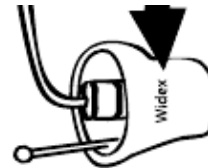


Folieschaaltje

*Tip: het Rechterhoortoestel heeft een Rode markering en het linkerhoortoestel een blauwe.
De R van rood en rechts is een ezelsbruggetje om het makkelijk te kunnen onthouden.*

1. Hang eerst het toestel achter het oor, zodat het hoortoestel en het slangetje prettig op het oor rusten, vlakbij uw hoofd.

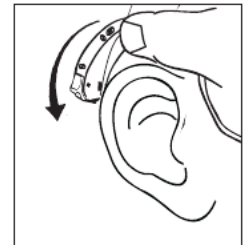


2. Duw dan de dome of het folieschaaltje in de gehoorgang, terwijl u het onderste deel van het slangetje vasthoudt – vaak is dit wat schuin omhoog.
Om de dome of het folieschaaltje diep genoeg in het oor in te brengen, kunt u wat aan het oor trekken op de plek waar op de afbeelding hiernaast het pijltje staat. Duw met uw pink de dome of het folieschaaltje wat aan.

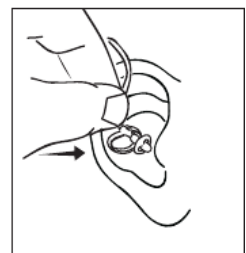


Controleer regelmatig of het hoortoestel en de oorset nog correct op/in het oor zitten.

Hoortoestel en dome/folieschaaltje verwijderen

1. Verwijder eerst het hoortoestel van achter de oorschelp.

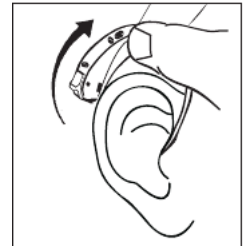

2. Trek daarna voorzichtig de dome of het folieschaaltje uit de gehoorgang, terwijl u het onderste deel van het slangetje vasthoudt.

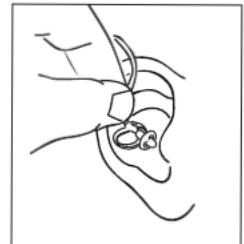

Hoortoestel schoonmaken

Gebruik een zachte doek om uw hoortoestel schoon te wrijven. Reinig uw hoortoestel nooit met water, een schoonmaakmiddel of een andere vloeistof.



Gebruikt u het hoortoestel niet, laat dan de batterijlade openstaan. Zo wordt het hoortoestel geventileerd en kan eventueel aanwezig vocht verdampen.



Hoortoestel drogen


Nog beter is het om uw hoortoestel, met het batterijklepje open, dagelijks te drogen in een speciaal elektrisch droogapparaat. Zo voorkomt u dat er vocht in uw hoortoestel komt dat uw hoortoestel kan beschadigen. Daarnaast doodt de uv-lamp in het elektrische droogapparaat bacteriën en schimmels.



U kunt uw hoortoestel, met het batterijklepje open, ook drogen in een eenvoudig droogdoosje waarin u een droogtablet legt. De droogtablet is oranje. Na enige tijd wordt de droogtablet wit: dan mag u deze vervangen door een nieuwe tablet.



Dome schoonmaken

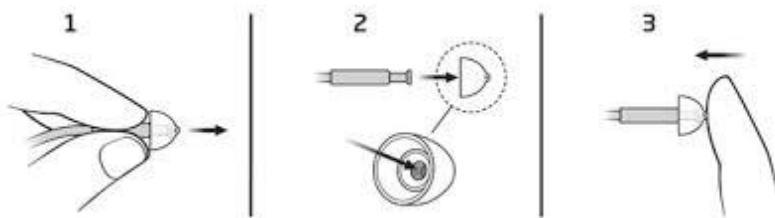


Verwijderen/aanbrengen dome



1. Zorg dat de dome schoon en vrij van oorsmeer of vocht is. Anders kan de dome loskomen van het slangetje.
2. Veeg de oorset regelmatig schoon met een vochtig doekje (te verkrijgen bij HoortoestelWinkel). Gebruik nooit alcohol of andere schoonmaakmiddelen om de oorset te reinigen.

Wordt de dome slap of vertoont hij scheurtjes: vervang deze dan altijd door een nieuwe. Mocht u het prettiger vinden, dan kunt u altijd naar de winkel komen om de dome door een medewerker te laten vervangen.

Folieschaaltje schoonmaken

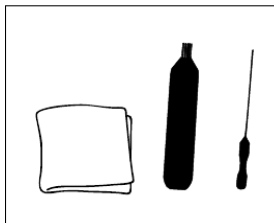


1. Heeft er zich oorsmeer opgehoopt op het folieschaaltje? Gebruik dan het kleine borsteltje om dit te verwijderen.
2. U kunt de buitenkant van het folieschaaltje ook schoonmaken met een vochtig doekje.
3. Is uw folieschaaltje voorzien van een ontluchting, gebruik dan het reinigingspennetje om de ontluchting te reinigen.

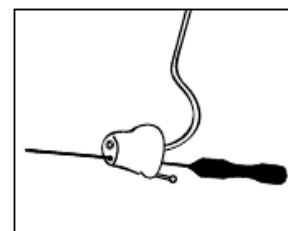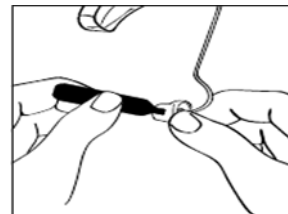


Reinigingspennetje, borsteltje en doekjes zijn verkrijgbaar bij HoortoestelWinkel. Mocht u het prettiger vinden, dan kan een medewerker het folieschaaltje voor u schoonmaken.

Verstopt slangetje reinigen

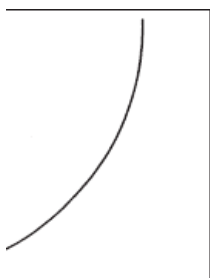


Reinigingsdraad


1. Verwijder de oorset van het hoortoestel.

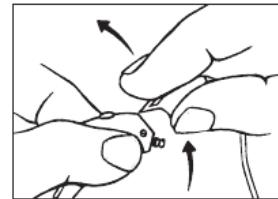

2. Trek de dome of het folieschaaltje van het slangetje af.

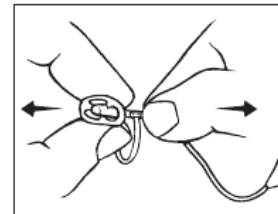

3. Voer de reinigingsdraad door het slangetje totdat de draad aan de andere kant tevoorschijn komt.

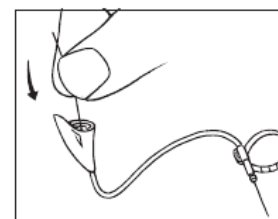

Dome en thin tube vervangen

Dome – De dome moet regelmatig worden vervangen. De levensduur ervan is per persoon verschillend en hangt af van een aantal factoren, zoals hoe vaak het hoortoestel wordt gebruikt en de samenstelling van het oorsmeer van de gebruiker. Wordt de dome slap of vertoont deze scheurtjes: vervang deze dan altijd! Dit is belangrijk, want het kan gebeuren dat deze anders in uw oor blijft vastzitten.

Thin tube – De thin tube (het slangetje) hoeft meestal niet zo vaak vervangen te worden. Wordt de thin tube hard of geel of vertoont hij barstjes, vervang deze dan door een nieuwe. Kom hiervoor naar de HoortoestelWinkel voor uitleg of laat een van de medewerkers de thin tube vervangen.

Folieschaaltje en thin tube vervangen

Folieschaaltje – Een folieschaaltje is op maat van uw oor gemaakt en hoeft niet zomaar vervangen te worden. Dit hoeft alleen als deze te klein geworden is of wanneer deze is stukgegaan. Mocht het toch nodig zijn, kom dan naar HoortoestelWinkel.

Thin tube – De thin tube (het slangetje) hoeft niet zo vaak vervangen te worden. Wordt de thin tube hard of geel of vertoont hij barstjes, vervang deze dan door een nieuwe. Kom hiervoor naar HoortoestelWinkel voor uitleg of laat een van onze medewerkers de thin tube vervangen.

Wat als het hoortoestel niet werkt?

Werkt uw hoortoestel niet, dan kan dat zijn omdat:

- het hoortoestel niet is ingeschakeld. Controleer of de batterijlade, die tevens aan-/uitschakelaar is, goed dichtzit;
- de batterij leeg is. Vervang de batterij. Zorg ervoor dat u de batterij correct plaatst en dat u de batterijlade goed sluit;
- de geluidsuitgang van de dome of het folieschaaltje verstopt is. Maak de geluidsuitgang schoon zoals hiervoor is beschreven. Vervang indien nodig de thin tube en/of dome.

Wat als het hoortoestel piept/fluit?

Wanneer uw hoortoestel piept/fluit, dan kan dat zijn omdat:

- uw folieschaaltje niet correct in de gehoorgang is geplaatst. Verwijder de oorset en breng deze opnieuw aan;
- uw oor verstopt zit met oorsmeer; dit kunt u laten controleren door uw audicien. Als dit het geval is, zult u een afspraak met de huisarts moeten maken om het schoon te laten maken;
- de thin tube of dome vervangen moet worden.

Kom altijd even langs in de winkel als u last blijft houden van een piepend of fluitend geluid.